

Návod k použití: Hivox iontová maska

Upozornění:

1. Před použitím si pozorně přečtete návod k použití.
2. Uvědomte si, že při používání iontové masky je vaše pokožka zjemnělá a citlivá.
3. Pokud se objeví jakékoliv problémy nebo podráždění, vyhledejte okamžitou pomoc dermatologa.
4. Udržujte z dosahu dětí.
5. Likvidaci s použitými bateriemi zkonzultujte s odpovědnými osobami.

Varování:

Prosím, zkonzultujte s odborníkem, pokud se na vás vztahuje některá z níže uvedených situací.

- a) těhotenství
- b) citlivá pokožka
- c) implantovaný elektronický pace maker nebo monitor

Lesklá pokožka s mladistvou jemností:

Péče o vaši pokožku ještě nikdy nebyla tak pohodlná a efektivní, jako s Iontovou maskou Mirage. Zlatu podobný materiál, ze kterého je maska Mirage vyrobena, umožňuje efektivní a výkonný rozptyl elektronů po povrchu masky, čímž oddělí kladné a záporné ionty pokožky. Tím se výrazně zkrátí doba aplikace a znásobí se účinek klasické pleťové masky. Od nynížka už nikdy nepřestanete s péčí o pleť.

Co znamená pronikání iontů?

Pronikání iontů se vztahuje k iontoforéze.

Iontový průnik má vztah k saturaci iontů v mikro elektrickém proudu při pohybu iontů. Únik iontů z pokožky s sebou odnáší mrtvé kožní buňky a hluboko uložený kožní maz. Naproti tomu, průnik iontů do pokožky urychluje pronikání výživných látek z krémů a přivádí je do hlubších vrstev pod pokožkou.


Princip působení iontové masky:

Působení Iontové masky je založeno na principu výměny iontů. Stejně nabitě částice se odpuzují a opačně nabitě se přitahují. Masky odděluje kladné a záporné ionty pokožky, což usnadňuje čištění pleti a vstřebávání výživných látek. Jinými slovy s Iontovou maskou dosáhnete mnohem lepších výsledků, než když používáte klasickou pleťovou masku samostatně.

Tradiční péče o pleť:


Pleťový přípravek:

- Stratum corneum
- Granulosum
- Stratum spinosum
- Stratum germinativum

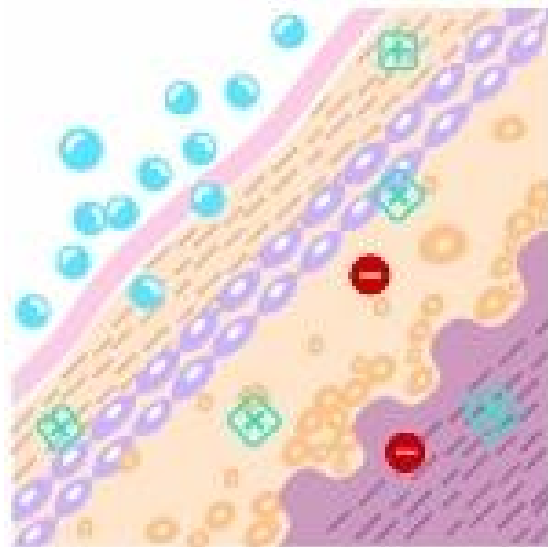


Tradiční přípravek není schopen dostatečně zjemnit ochrannou vrstvu stratum corneum, účinek je velmi omezený.

Anodové přitahování iontů:

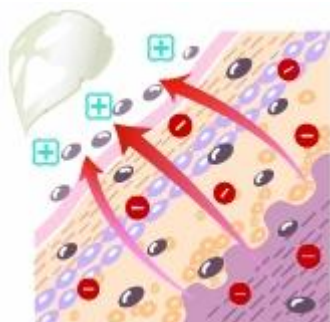

Odchod iontů z pokožky může zjemnit a povzbudit stratum corneum, čímž iontová maska napomáhá čistit pleť a bělicí přípravky pracují efektivněji do hloubky pleti.

Katodové přitahování iontů:

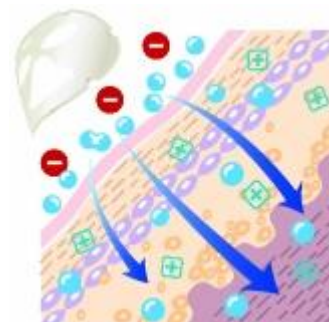

Pronikání iontů do kůže také zjemňuje a oživuje stratum corneum a uvolňuje póry. Tím maska napomáhá vstřebávání látek a uvolňuje je do hlubších vrstev pokožky.

Iontová maska nemá čistící, bělicí ani žádné jiné zkrášlující funkce. Musí se používat spolu s pleťovými přípravky.

Rychlý start:

1) Doporučené postupy:

Před použitím si odličte make-up a umyjte obličej.

Postup A:

Aplikace pleťové vody:



Navlhčete tradiční masku čistou vodou.



Naneste pleťový přípravek na obličej.



Zakryjte si obličej normální maskou a přes ni dejte masku iontovou.

Postup B:

Aplikace masky:



Navlhčete papírovou masku pleťovým přípravkem.



Zakryjte si obličej normální maskou a přes ni dejte masku iontovou.

Postup C:

Aplikace masky na jedno použití:



Rozbalte masku na jedno použití.



Zakryjte si obličej normální maskou a přes ni dejte masku iontovou.

2) Výběr programu:

Vyberte si požadovaný program podle požadovaného účinku pleťového přípravku.

Hluboce čistící & zlepšující cirkulaci	+	zjemnění a odstranění suchých kožních šupinek a kožního mazu
----------------------------------------	---	--------------------------------------------------------------

Doplnění výživy & zkrášlení pokožky	-	urychluje přenos a vstřebání pečujících a výživných látek do hlubších vrstev kůže
-------------------------------------	---	-----------------------------------------------------------------------------------

Rovnováha & vypnutí pokožky	→	oživuje pokožku a vyvažuje její pH
	←	

Doporučení:

- Vždy si vybírejte takové pleťové přípravky, které vyhovují vašemu typu pleti.
- Lidem s citlivou pletí se iontová maska neodporučuje používat vícerorát jak dvakrát týdně.


2) Údržba po používání:

- Cirkulární lepící elektrodu po použití, prosím, umístěte zpět do průhledného plastického obalu.
- Po odstranění příslušenství z Iontové masky, několikrát masku jemně omyjte tekoucí vodou.
- **Iontovou masku neotírejte, ani nepřekládejte!!**
- Před uložením zpět do krytu Masku osušte čistým papírem nebo ručníkem.
- Vyměňte cirkulární lepící elektrodu, jestliže ztratí své lepící vlastnosti.

Složení přístroje a součástky:

Tělo přístroje x1 polštářky	Iontová maska x 1 Baterie	Spojovací drát x 1 kompresivní maska x 5	Cirkulární elektrodové
--------------------------------	------------------------------	---------------------------------------------	------------------------


Ovládací tlačítka:

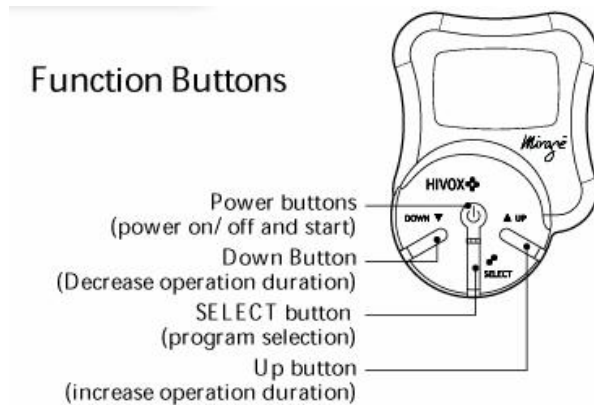

- power tlačítka (zapnout/vypnout a start)
- tlačítko down (zkrátí dobu aplikace)
- tlačítko select (výběr programu)
- tlačítko UP (prodlouží dobu aplikace)

LCD displej:


LCD Screen

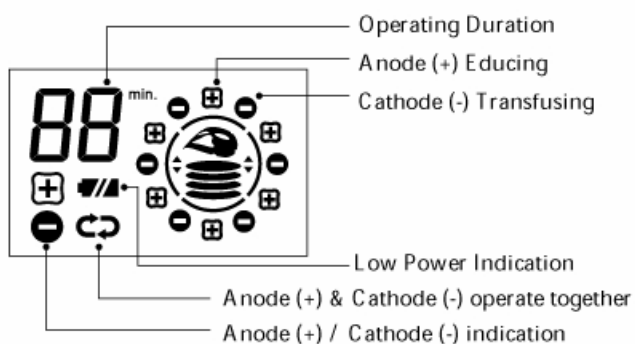


- operation durating (ukazatel času)
- anode (+) educing (anodová funkce)
- cathode (-) transfusing (katodová funkce)
- low power indication (ukazatel vybité baterie)
- anode (+) & cathode (-) operate together (anodová a katodová funkce zároveň)
- anode (+) & cathode (-) indication (ukazatel anody/katody)

Poskládání:

1. Vložte baterii do přístroje (označením CR – 2032 s + nahoru)

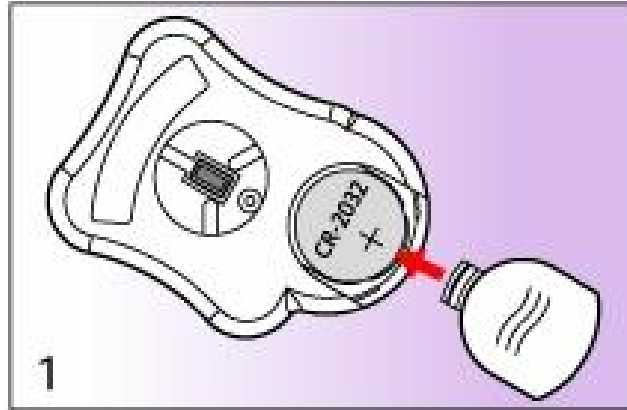

2. Zapojte svorku drátu přímo do přístroje do zadní spojovací dírky (drátem vzhůru), a poté spojte vnější bílou masku s Iontovou maskou.

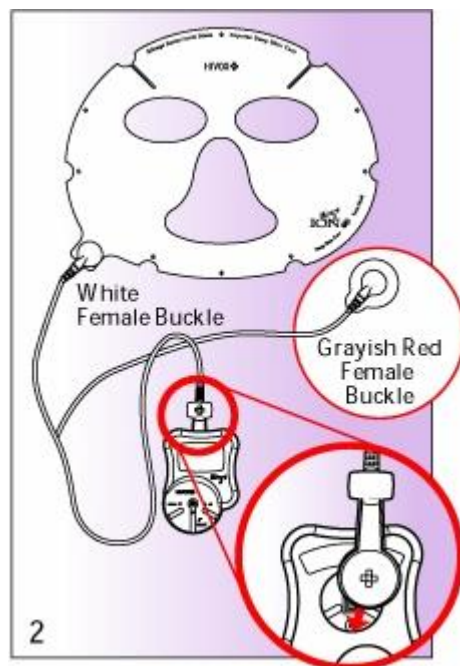

3. Šedo červenou vnější sponu s elektrodovým polštářkem je ideální umístit na horní část paže nebo rameno tak, aby se uzavřel elektrický obvod.

Funkce:

A. Výběr programu:

+ Anoda:

Stiskněte SELECT pro výběr +, na LCD displeji se ukáže +, poté stiskněte UP/DOWN tlačítko pro nastavení požadovaného času aplikace (5 – 30 minut s pětiminutovými intervaly).



- Katoda:

Stiskněte SELECT pro výběr -, na LCD displeji se ukáže -, poté stiskněte UP/DOWN tlačítko pro nastavení požadovaného času aplikace (5 – 30 minut s pětiminutovými intervaly).



↔ Střídání anody a katody:

Stiskněte SELECT pro výběr ↔, na LCD displeji se ukáže ↔, poté stiskněte UP/DOWN tlačítko pro nastavení požadovaného času aplikace (5 – 30 minut s pětiminutovými intervaly).




B. Start:

- 1) Pro spuštění operace po nastavení stiskněte POWER. Zvukový signál pípá každé 2 sekundy během operace.



- 2) Zapnout/vypnout zvukový signál:
Když je přístroj v provozu, signál pípá každé 2 sekundy. Uživatel může signál vypnout stisknutím DOWN nebo zapnout stisknutím UP.

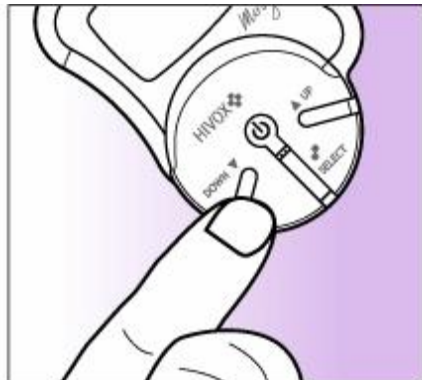

C. Vypnutí:

Přístroj se automaticky vypne po vypršení nastaveného času, nebo ho uživatel může vypnout stisknutím a podržením tlačítka POWER.

Odstraňování závad:

Problém	Důvod	Řešení
LCD displej nefunguje	Chybí baterie nebo je špatná polarita	Vyjměte a znovu správně vložte baterii nebo vložte novou baterii
	OFF režim	Restartujte přístroj stisknutím POWER
LCD displej se nezobrazí celý Tlačítko POWER nefunguje	Chybí baterie nebo je špatná polarita	Vyjměte a znovu správně vložte baterii nebo vložte novou baterii
Jasnost LCD displeje postupně slábne	Slabá baterie nebo špatná polarita	Vyjměte a znovu správně vložte baterii nebo vložte novou baterii
Přístroj se předčasně vypne před vypršením nastaveného času	Slabá baterie	Vyměňte baterii
	Omylem zmáčkuté tlačítko POWER	Stiskněte znovu POWER pro opětovný start

- Se svými dotazy se prosím obraťte na místní servisní centrum.
- Nerozebírejte ani neopravujte přístroj.
- Neobsahuje žádné součástky, které by si uživatel mohl opravit sám.

Normy:

Napájení Lithiovou baterií	CR - 2032 DC 3V
Výstupní napětí	3 V
Výstupní proud	max.3 mA +/- 20 (založeno na napájení 1000 Ohm)
Výstupní čas	od 5 - 30 minut s 5 minutovými intervaly
Výstupní program	anodový, katodový a smíšený
Provozní podmínky	10°C - 40°C, 30% - 85% relat.vlhkost
Skladovací podmínky	-10°C - 50°C, 10% - 95% relat. vlhkost
Přepravní podmínky	-10°C - 50°C, 10% - 85% relat. vlhkost
Velikost	45 x 63 x 13 mm
Hmotnost	24 g (včetně baterie)